



motorola

CARE

3-σε-1 ανέπαφο
βρεφικό
θερμόμετρο

Μοντέλο:
MBP66NT


Quick Start Guide


EU_EL


For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide (available for download from www.motorolastore.com).

1. Setting up the 3-in-1 non-contact baby Thermometer

- Κλειδί στις ακριβείς μετρήσεις είναι ο καθαρός αισθητήρας. Για να καθαρίσετε τον αισθητήρα, χρησιμοποιήστε βαμβακερή μπατονέτα ελαφρώς εμποτισμένη με οινόπνευμα για να σκουπίσετε απαλά την επιφάνειά του, και έπειτα αμέσως στεγνώστε χρησιμοποιώντας μια καθαρή μπατονέτα. Περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι εντελώς στεγνός πριν τη μέτρηση της θερμοκρασίας.

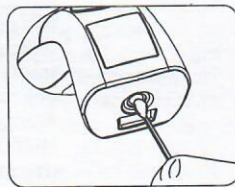



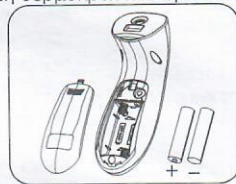


- Τα λιπίδια της επιφάνειας του δέρματος στο μέτωπο μπορεί να προκαλέσουν ανακριβή μέτρηση, οπότε βεβαιωθείτε ότι το μέτωπο είναι καθαρό. Εάν καθαρίσετε το μέτωπο, περιμένετε άλλα 5 έως 10 λεπτά πριν από τη μέτρηση.
- Αν η θερμοκρασία αποθήκευσης διαφέρει σημαντικά από εκείνη της περιοχής μέτρησης, περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία θερμομέτρου εξισωθεί με τη θερμοκρασία δωματίου, περίπου 30 λεπτά, πριν τη χρήση.
- Αφαιρέστε απαλά το κάλυμμα της μπαταρίας και εγκαταστήστε 2 x 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες (οι οποίες βρίσκονται εντός της συσκευασίας) σύμφωνα με την κατάλληλη πολικότητα, σύρετε και πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας, πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε το θερμόμετρο.






2. Πώς να μετράτε τη θερμοκρασία στο μέτωπο

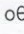Βεβαιωθείτε πως ο αισθητήρας είναι καθαρός πριν τη μέτρηση.



1. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε το θερμόμετρο. Όταν η συσκευή είναι έτοιμη, θα εμφανιστεί ' - - ' στην οθόνη.
2. Βεβαιωθείτε ότι το θερμόμετρο είναι σε λειτουργία Μετώπου. Το σύμβολο Μετώπου  θα εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Τοποθετήστε το θερμόμετρο περίπου 3 εκ (γύρω στις 1 ίντσα) από το κέντρο του μετώπου με τον αισθητήρα να στοχεύει ανάμεσα στις φρύδια.
4. Πατήστε μία φορά το κουμπί , όταν η μέτρηση ολοκληρωθεί, θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης.
5. Αν η μέτρηση θερμοκρασίας είναι κάτω από 38°C, το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα ενεργοποιηθεί το Πράσινο LED. Αν η μέτρηση είναι 38°C ή περισσότερο, το σύμβολο  θα εμφανιστεί στην οθόνη με Κόκκινο LED.
6. Περίπου 30 δευτερόλεπτα από τη χρήση, το θερμόμετρο θα ηχήσει αυτόματα και θα απενεργοποιηθεί.



Σημείωση:

- Ο Συναγερμός Υψηλής Θερμοκρασίας εμφανίζεται σε λειτουργία Μετώπου  και Μετώπου/Σιωπηλή . Κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας ενός ασθενή, βεβαιωθείτε πως το θερμόμετρο είναι σε λειτουργία Μετώπου. Το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη.
- Αν το δέρμα καλύπτεται με μαλλιά, ιδρώτα, ή σκόνη, καθαρίστε την περιοχή και περιμένετε 10 λεπτά πριν τη μέτρηση.
- Βεβαιωθείτε ότι το θερμόμετρο παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια της μέτρησης και ότι ο ασθενής δεν κινείται μέχρι να ολοκληρωθεί η μέτρηση, καθώς η κίνηση ενδέχεται να επηρεάσει τη μέτρηση.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΛΣΙΟΥ/ΦΑΡΕΝΑΙΤ

Στη λειτουργία αναμονής, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε βαθμούς Κελσίου (°C) και Φαρενάιτ (°F) πιέζοντας και κρατώντας πατημένα τα κουμπιά Μέτωπο/Αντικείμενο  και Μνήμη  ταυτόχρονα.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά, διαβάστε αυτόν τον Οδηγό Γρήγορης Εναρξης Χρήσης ή τον Οδηγό Χρήσης ενός από τα μοντέλα που αναφέρονται στη σελίδα 1.

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθμό:

+491805 938 802 στην Ελλάδα E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Περιορισμένη εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της μάρκας Motorola που κατασκευάζεται κατόπιν αδειάς από την Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;

Πέραν των εξαιρέσεων που ορίζονται παρακάτω, η BINATONE εγγυάται ότι το παρόν προϊόν ("Προϊόν") ή εγκεκριμένο αξεσουάρ ("Αξεσουάρ") μάρκας Motorola που πωλείται για χρήση με το εν λόγω προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικών και κατασκευής υπό συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Εγγύηση αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.

Ποιος καλύπτεται;

Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό καταναλωτή-αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της BINATONE;

Η BINATONE ή η εξουσιοδοτημένη εταιρεία διανομής της, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εντός ενός εμπορικού εύλογου χρονικού διαστήματος, θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση οποιοδήποτε Προϊόν ή Αξεσουάρ δεν συμμορφώνεται με την παρούσα Εγγύηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ισοδύναμα από λειτουργικής πλευράς ανακατασκευασμένα / μετασκευασμένα / ήδη ιδιόκτητα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;

ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ Η Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Η ΣΙΩΠΗΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ΜΟΤΟΡΟΛΑ Η Η BINATONE, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, Η ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Η ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΕΣ. Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση συμπληρωματικών ή αποθετικών βλαβών, ή τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα Εγγύηση σας παραχωρεί συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από τη μία δωσιδικία στην άλλη.

Καλυπτόμενα προϊόντα	Διάρκεια κάλυψης
Καταναλωτικά προϊόντα	Δύο (2) έτη από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο καταναλωτή-αγοραστή του προϊόντος.
Καταναλωτικά αξεσουάρ	Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή- αγοραστή του προϊόντος.
Καταναλωτικά προϊόντα και αξεσουάρ που επιδιορθώνονται ή αντικαθίστανται	Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερης διάρκειας.